



# Deneo®.Lab

FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT  
*BLOOD SAMPLING CHAIR*



DENEO® est un concentré d'innovations pour permettre une meilleure accessibilité du patient aux soins et un plus grand confort pour le patient et le praticien. La conception du DENEO® est le résultat d'un long travail de recherche et de nombreuses rencontres sur le terrain avec les professionnels des laboratoires. Cette recherche s'est concrétisée par une demande de brevet et le dépôt de modèles.

*Deneo® is a very innovative product allowing the best patient accessibility to care and the greatest comfort for both the practitioner and the patient. The design of DENEO® is the result of a long research work and numerous tests in the field with phlebotomy professionals. This research ended up with several patents.*



## CONFORT

- > Rotation 360° (sur certains modèles)
- > Encombrement réduit, optimisation de l'espace
- > Sellerie Bodyshape® : positionnement naturel



## ACCESSIBILITÉ

- > Concept Sit'n Go® : position d'accueil à 50 cm du sol (selon modèles)
- > Angle de l'appui-jambes modifié pour un accès facilité



## SÉCURITÉ

- > Position d'urgence facilitée, sans effort et rapide
- > Appui-bras sur le dossier et poignées intégrées > longévité
- > Base circulaire : stabilité du fauteuil
- > Sellerie non-feu M1 (suivant choix de couleur, voir nuancier)
- > Capacité patient : 200 kg



## HYGIÈNE

- > Revêtement avec protection antibactérienne (suivant choix de couleur, voir nuancier)
- > Nettoyage facilité
- > Sellerie sans couture
- > Poignées amovibles

## COMFORT

- > 360° rotation (on specific models only)
- > Reduced volume, optimized space
- > Bodyshape® upholstery: natural body position

## ACCESSIBILITY

- > Sit'n Go® concept: welcome position at 50 cm from the ground (specific models)
- > New legrest angle for easier access

## SAFETY

- > Easy, effortless and rapid emergency position
- > Armrests on the backrest and integrated handles > long service life
- > Circular base: chair stability
- > M1 fire retardant upholstery (depending on the color, see color chart)
- > Maximum capacity: 200 kg

## HYGIENE

- > Covering with antibacterial protection (depending on the color, see color chart)
- > Easy to clean
- > Seamless upholstery
- > Removable handles


Capacité  
Capacity



200 kg



Modèle déposé  
Registered model

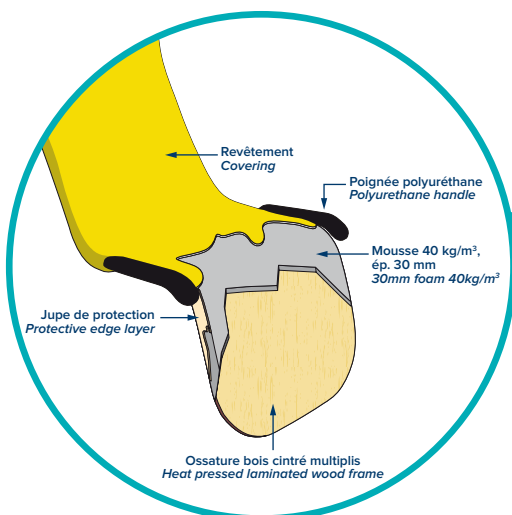

Concept Sit'n Go® (selon modèles) / Sit'n Go® concept (specific models)

Position  
initiale  
du fauteuil.  
Initial chair  
position.



Le patient s'appuie sur les 2 poignées latérales et le fauteuil se met en position d'accueil.  
*The patient positions his hands on the lateral grips and the seat lowers to facilitate the entry.*



Le fauteuil reprend sa position sans aucune intervention du praticien.  
*When the patient leans back, the chair automatically swings back to a comfortable position.*



La position d'urgence peut être obtenue à n'importe quel moment tout en maintenant la position des bras par rapport au corps.  
*Effortless, the emergency position is obtained at any time, without effort for the practitioner.*



## CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Hauteur fixe (assise 50 cm)  
et hauteur variable hydraulique (assise réglable de 51 à 71 cm)  
Structure et base époxy blanc (réf. 80010-02R + 80015-02R)  
Colonne époxy blanc et piétement corolle chromée  
(réf. 80000-02R + 80005-02F + 80005-02R)  
Colonne et base circulaire chromées (réf. 80070-02R + 80075-02R)  
2 poignées polyuréthane intégrées au niveau de l'assise  
Sellerie monobloc sans couture, revêtement M1, mousse épaisseur  
30 mm, densité 40 kg/m<sup>3</sup>  
2 appui-bras amovibles, incurvés sur rotules avec mousse et  
revêtement M1 thermoformé sans couture  
Poids maximum du patient autorisé 200 kg (testé en statique à 500 kg)

## STANDARD FEATURES

Fixed height (seat at 50 cm)  
and hydraulic variable seating height from 51 to 71 cm  
White epoxy structure and base (ref: 80010-02R + 80015-02R)  
White epoxy column and chromed circular base  
(ref: 80000-02R + 80005-02F + 80005-02R)  
Column and circular base chromed (ref: 80070-02R + 80075-02R)  
Two lateral polyurethane hand grips integrated to the seat  
One-piece structure seamless upholstery foam thickness 30 mm,  
density 40 kg/m<sup>3</sup>  
Two removable formed armrests. Swivel adjusting system.  
Seamless heat formed M1 covering  
200 kg patient weight capacity (tested at a static weight of 500 kg)



**80000-02R**

**Hauteur fixe base circulaire avec rotation - concept Sit'n Gō®**  
**Fixed height circular base with rotation - concept Sit'n Gō®**

**80010-02R**

**Hauteur fixe base 4 roues ø 50 mm avec rotation - concept Sit'n Gō®**  
**Fixed height base 4 castors ø 50 mm with rotation - concept Sit'n Gō®**

**80070-02R**

**Hauteur variable hydraulique avec rotation - concept Sit'n Gō®**  
**Hydraulic variable height with rotation - concept Sit'n Gō®**

**80005-02F**

**Hauteur fixe base circulaire • Fixed height circular base**

**80005-02R**

**Hauteur fixe base circulaire avec rotation • Fixed height circular base with rotation**

**80015-02R**

**Hauteur fixe base 4 roues ø 50 mm avec rotation**  
**Fixed height base 4 castors ø 50 mm with rotation**

**80075-02R**


**Hauteur variable hydraulique avec rotation**  
**Hydraulic variable height with rotation**

Tous ces modèles bénéficient du nouvel angle de l'appui-jambes pour faciliter l'accès  
All these models feature the new legrest angle for easier access

## OPTIMISER L'ESPACE / OPTIMIZE SPACE

La rotation 360° permet  
au praticien de prélever  
sur l'un ou l'autre bras  
sans se déplacer.

The 360° rotation allows  
easy transition to the  
opposite side of the  
patient without moving.

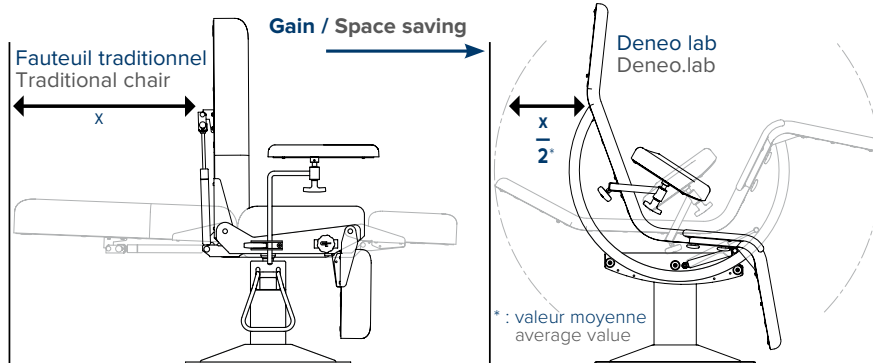

## OPTION\*

\* A demander impérativement lors de la commande, montage usine  
Plant installed, must be ordered with initial order

## ACCESSOIRES / ACCESSORIES



**167-10**

Porte-rouleau  
(long. maxi 50 cm, ø 20 cm)  
Paper roll holder  
(length max 50 cm, ø 20 cm)



**957**

Support lampe pour étaux  
Lamp support for clamp



**964**

Plateau seul  
Stainless steel pan  
(240 x 180 x 30 mm)



**80922-10**

Paire de poignées d'assistance  
Pair of assistance handles

**80901-01**

Plateau avec bras rigide  
pivotant (droite / gauche)  
S/S pan with swivelling arm (right / left)



**80193 + 80920-01**

Tige porte sérum  
IV pole



**80920-01**

Support pour étaux  
(côté jambes ou tête)  
Clamp support  
(leg or head side)



**80921-01 + 80920-01**

Étau pour accessoires ø 16 mm  
Clamp for accessories ø 16 mm



**Lampes / Lamps**

**80921-01 + 80920-01**

Se référer à la documentation  
Refer to the literature



**80905-01**

Protection plastique (côté jambes)  
Plastic covering (leg section)



**80906-01**

Protection plastique (côté tête)  
Plastic covering (head section)

## HAUTEUR FIXE • FIXED HEIGHT

POIDS NET • NET WEIGHT : 53 KG  
POIDS BRUT • GROSS WEIGHT : 67 KG  
VOLUME COLIS • PACKAGE VOLUME : 1,164 M<sup>3</sup>

## HAUTEUR VARIABLE HYDRAULIQUE • HYDRAULIC VARIABLE HEIGHT

POIDS NET • NET WEIGHT : 60 KG  
POIDS BRUT • GROSS WEIGHT : 74 KG  
VOLUME COLIS • PACKAGE VOLUME : 1,164 M<sup>3</sup>


### CHOIX DE SELLERIES NON-FEU M1 ANTIBACTÉRIEN

### CHOICE OF M1 ANTIBACTERIAL FIRE-RETARDANT UPHOLSTERY


GAMME CLASSIQUE • CLASSIC RANGE

- CA - TOMATE  
CA - TOMATO
- CB - FUCHSIA  
CB - FUCHSIA
- CC - PRUNE  
CC - PLUM
- CD - CITRON  
CD - LEMON
- CE - PAON  
CE - PEACOCK
- CF - SAPHIR  
CF - SAPHYR
- CG - BLEU MINUIT  
CG - MIDNIGHT BLUE
- CH - GLACIER  
CH - GLACIER
- CI - OBSCURE  
CI - DARK
- 57 - ANTISTATIQUE  
57 - ANTISTATIC
- CJ - GRIS  
CJ - GREY
- CK - PLATINE  
CK - PLATINUM


### Hauteur fixe base circulaire / Fixed height circular base

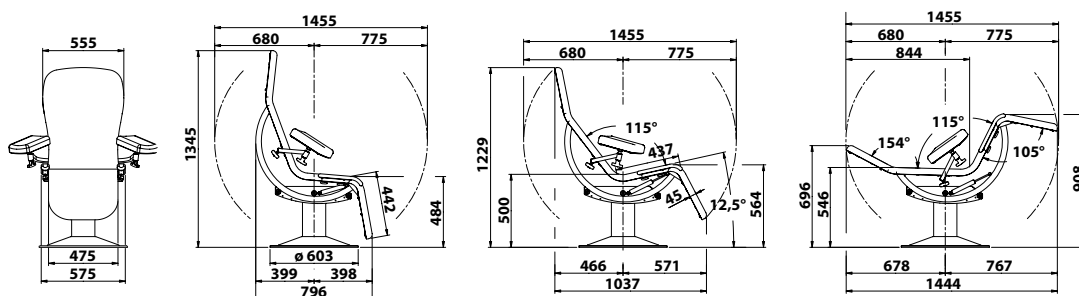

### Hauteur variable hydraulique / Hydraulic variable height

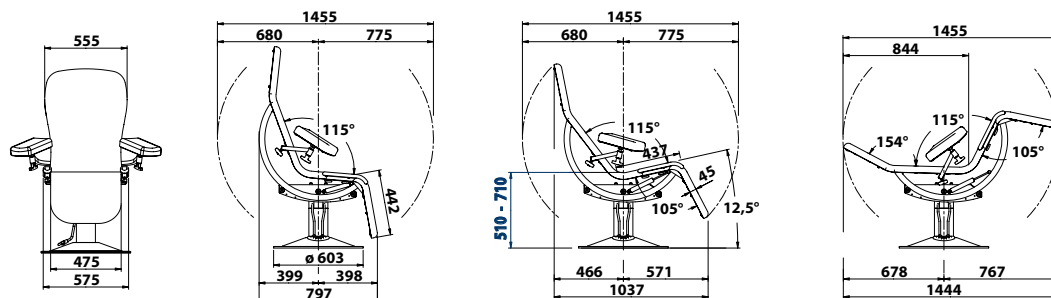

### Hauteur fixe sur base 4 roues / Fixed height with 4 castors base

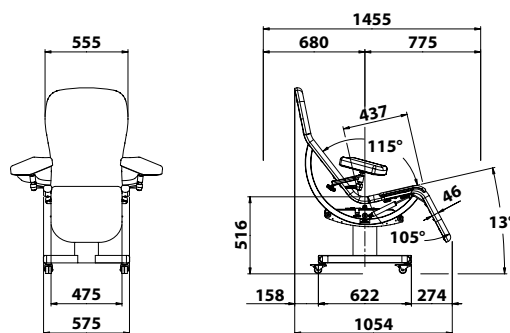

GAMME ÉLÉGANCE\* • ELEGANT RANGE\*

- EA - VERT PROFOND  
EA - DEEP GREEN
- EB - VÉGÉTAL  
EB - VEGETAL
- EC - ORAGE  
EC - STORM
- ED - BLEU ARGENTÉ  
ED - SILVER BLUE
- EE - PAPRIKA  
EE - PAPRIKA
- EF - CRÉPUSCULE  
EF - TWILIGHT
- EG - CAMEL  
EG - CAMEL
- EH - LIÈGE  
EH - CORK

\* La gamme Éléance est soumise  
à l'application d'un supplément tarifaire.  
Merci de vous référer à la grille tarifaire.

\* The Elegance range is subject  
to the application of a price supplement.  
Please refer to the price list.

FE-13/22



22, rue de Saint-Denis-de-Gastines - 53500 Ernée, France  
+33 (0)2 43 05 17 76

PROMOTAL.COM